


# Bruksanvisning for hurtigttest

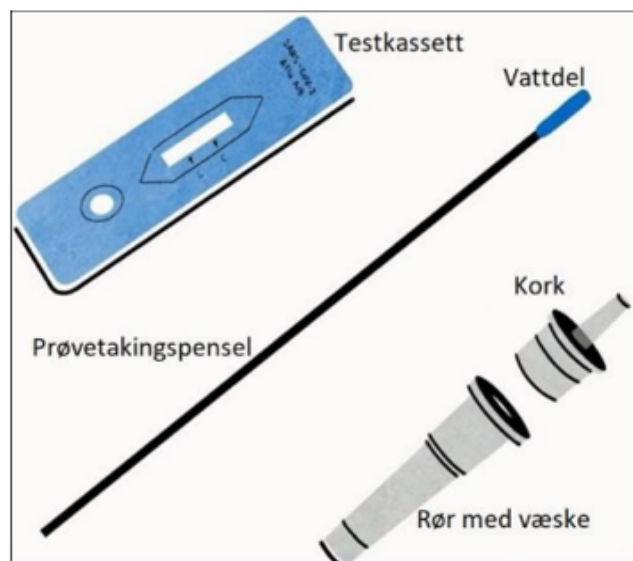

Utstyret du har fått

Du har fått utdelt hurtigttest fra Moss kommune. Hurtigttesten skal BARE benyttes hvis du har fått beskjed om det fra skole/barnehage eller kommunens smittesporingsteam.

Denne veilederen må leses igjennom før bruk av hurtigttest.



## Vanlig stilte spørsmål

### Gjør testen vondt?

- Nei, dette er en fremre neseprøve, den kan være ubehagelig, men den skal ikke gjøre vondt.

### Hva gjør vi hvis testen blir ødelagt / noe går galt?

- Ta kontakt med oss på telefon eller bestill time til test via vår nettbestilling.

### Hva gjør vi om kulene er grønne?

- Kontakt testsenteret for et nytt prøvesett, eller for å ta testen hos oss. Prøvesettet kan ikke brukes.

### Hva om testen ikke lar seg gjennomføre?

- Vi har god erfaring og kompetanse og bistår gjerne med å ta testen her på testsenteret.

### Hva om vi ikke ønsker å teste barnet?

- Det er selvfølgelig eget valg om en vil teste barnet eller ikke. Velger man og ikke følge testregimet gjelder vanlige karantenerregler.

### Holder det med hurtigttesten selv om det utvikles symptomer?

- Ved symptomer anbefaler vi alle å bestille time til PCR-test og i mellomtiden holde seg hjemme.

---

## Kontaktinfo

Koronatestsenteret kan nås på telefon 40404919 og tastevalg 2 hver dag mellom kl. 08:15 og 15:30.

For generell info om korona kan du besøke Moss kommune sine hjemmesider: <https://www.moss.kommune.no/korona>

For nettbestilling kan dere besøke: <https://www.helseboka.app/booking/staff/82303>



Nettbestilling

## DEL 1

Utstyret du har fått utdelt skal ligge i romtemperatur i 15 minutter før bruk. I tillegg trenger du en egnet søppelpose og en klokke/mobil med varsling.


1. Vask hendene godt før du starter.
2. Legg utstyret på et rent, tørt og jevnt underlag (f. eks. et bord).

**OBS!** Se på tørkemiddelpakken.  
GUL = Klar til bruk  
GRØNN = Feil ved prøvesettet



3. Åpne foliepakningen og ta ut testkassetten. **Ikke** berør prøvebrønnen (rundt felt) og testfeltet (firkantet felt) på kassetten.

4. Ta av forseglingen på røret (folielokket) og plasser røret stående i f. eks. en liten kopp. Pass på at væsken ikke tømmes ut.

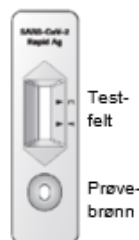

## DEL 2

5. Når prøverøret står klart åpne pakningen med den sterile prøvetakingspenselen. **Ikke** berør vattdelen på penselen.

Ta prøven fra begge nesebor, start med nesebor med eventuelt mest sekret. Samme prøvetakingspensel skal benyttes i begge nesebor.

## Hvordan ta testen

Se litt opp.

Før pinnen forsiktig inn 1-2 cm.

Vri pinnen rundt, frem og tilbake forsiktig i neseveggen i ca. 10 sek.

Gjenta i det andre neseboret.



## DEL 3

6. Sett prøvepinnen ned i røret, med vattpinnen ned og press inn sidene på røret til du får kontakt med pinnen. Vri pinnen rundt mer enn 5 ganger.


7. Trekk deretter ut pinnen samtidig som sidene er presset mot pinnen.

8. Trykk på korken.



9. Pass på at korken sitter fast, vend røret og drypp 3 dråper forsiktig på prøvebrønnen.

## DEL 4

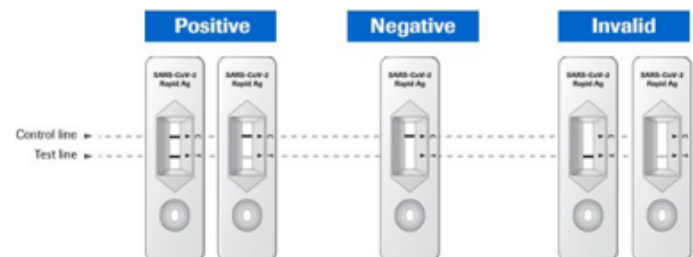

- Kassetten må ikke flyttes etter det er dryppet på den.
- Les aldri av før 15 min har gått – heller aldri etter 30 min er gått.

**Positiv test:** To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyans i testområdet skal vurderes som positiv.

**Negativ test:** Kun en farget linje i kontrollområdet (C) vises.

**Ugyldig test:** Ingen farget linje i kontrollområdet (C) vises. Testen må i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkasset.

Ved positiv test ring **47690170**.

For spørsmål vedrørende avlesning eller andre henvendelser ring **40404919**.